

A.4018

Self-light®



Équipements médicaux à usage unique pour anoscopie

Disposable medical proctoscopes



Made in Italy

Les anoscopes à usage unique Self-Light sont équipés d'un système d'éclairage autonome **Self-light®** permettant au spécialiste d'effectuer les endoscopies et les différents types d'intervention thérapeutique en conditions ambulatoires, dans une salle ou à domicile. Grâce à leur poignée, les **Self-light®** peuvent être également éclairés en utilisant l'un des générateurs de lumière produits par Sapi Med. Conçus en matière plastique transparente, les anoscopes sont conditionnés en sachet individuel et scellé. La pen-light est incluse dans la boîte.

The **Self-light®** disposable proctoscope utilises a convenient battery-operated pen light, enabling examinations and minor therapeutic procedures to be performed in a non-specialist out-patients' department, on the ward or at home. **Self-light®** can also be used with a plug-in light source produced by Sapi Med, if desired. **Self-light®** proctoscopes are made of transparent plastic material and supplied in individually sealed bags. A free pen-light is included in each box of scopes.



Équipements médicaux pour anoscopie

Disposable devices for anoscopy


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tubes parfaitement transparents
- Absence totale d'imperfection
- Garanties atraumatique
- Éclairage parfait avec source de lumière froide Sapi Med ou pen-light
- Conçus en matière plastique de catégorie alimentaire en conformité avec le D.M 21/03/73
- Ne contient pas de latex

TECHNICAL FEATURES

- Clear, transparent plastic proctoscopes
- Range of four size/designs to suit varying clinical needs
- Flash-free
- Guaranteed atraumatic
- Illumination by either Sapi Med cold-light source or pen-light
- Conforms fully with essential requirements of European Council Directive 93/42/EU.
- Latex Free

REF A.4018

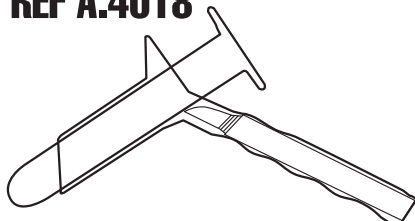

Anoscope diagnostic/pédiatrique "bec de flûte"

Tube: longueur 56 mm
Faisceau lumineux: diam 18 mm
Permet une vision endoscopique parfaite
Conditionnement: 75 pièces + 1 pen-light

Proctoscope diagnostic/paediatric flute beaked

Disposable self-lighting
Tube length: 56mm
Tube diameter: 18mm
For clear and easy rectal examination
Quantity per box: 75 pcs. + 1x pen-light

REF A.4019




Anoscope diagnostic/pédiatrique "tronc"

Usage unique auto-éclairant
Tube: longueur 54 mm
Faisceau lumineux: diam 18 mm
Permet une vision endoscopique parfaite
Conditionnement: 75 pièces + 1 pen-light

Proctoscope diagnostic/paediatric trunk-end

Disposable self-lighting
Tube length: 54mm
Tube diameter: 18mm
For clear and easy rectal examination
Quantity per box: 75 pcs. + 1x pen-light

REF A.4022

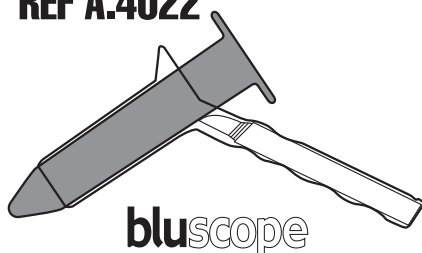


Anoscope d'opération Blu Scope, "tronc"

Usage unique, auto-éclairant, autoportant
Tube: longueur 79 mm
Faisceau lumineux: diam. 23 mm
Plus long d'environ 1,4 cm par rapport au A.4024, le mandrin présente quelques améliorations techniques qui facilitent les opérations du médecin et rendent l'exploration anale moins traumatique pour le patient. Mêmes indications d'utilisation que le A.4023. Il permet un contrôle parfait des parois du canal anal.
Conditionnement: 50 pièces + 1 pen-light

Surgical/Examination Blu Scope Proctoscope trunk-end

Disposable, self-lighting
Tube length: 79mm
Tube diameter: 23mm
It has an increase of about 14mm over the A.4024, so offering the practitioner improved access higher up the rectum. The introducer is designed for easy and atraumatic introduction to the patient. A.4022 has similar design characteristics to code A.4023. It allows excellent control of the anal canal walls.
Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light

REF A.4023

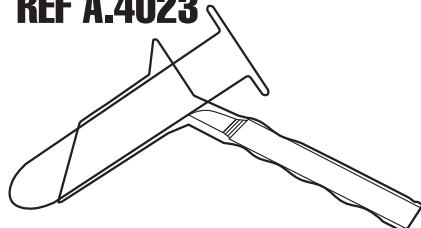


Anoscope d'opération "bec de flûte"

Usage unique, auto-éclairant, autoportant
Tube: longueur 88 mm
Faisceau lumineux: diam. 23 mm
Spécialement conçu pour l'exécution de biopsies, de ligatures élastiques et le traitement sclérosant des hémorroïdes, pour l'incision d'hématomes intra anaux, l'excision de pailles anales hypertrophiées, les sutures avec points hémostatiques après interventions de polypectomie et photocoagulation. Autoportant grâce à l'adhésif situé sur le côté.
Conditionnement: 50 pièces + pen-light

Surgical/Examination Proctoscope flute beaked

Disposable self-lighting
Tube length: 88mm maximum
Tube diameter: 23mm
Flute beak to perform biopsies, elastic ligatures and haemorrhoid sclerosis, incision of intra-anal haematomas, excision of hypertrophic anal papillae, sutures with haemostatic stitches following polypectomy, I.R. coagulation etc.
Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light

REF A.4024

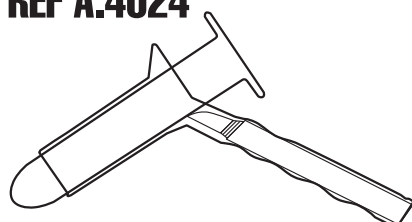

Anoscope d'opération, "tronc"

Tube: longueur 65 mm
Faisceau lumineux: diam. 23 mm
Caractéristiques identiques à "anoscope A.4023. Il permet un contrôle parfait des parois du canal anal.
Conditionnement: 50 pièces + 1 pen-light

Surgical/Examination Proctoscope trunk-end

Disposable self-lighting
Tube length: 65mm
Tube diameter: 23mm
A.4024 has similar design characteristics to code A.4023. Allows excellent control of the anal canal walls.
Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light

Distributed by