


A.5015


SCLEROJET
dr. F. GAY

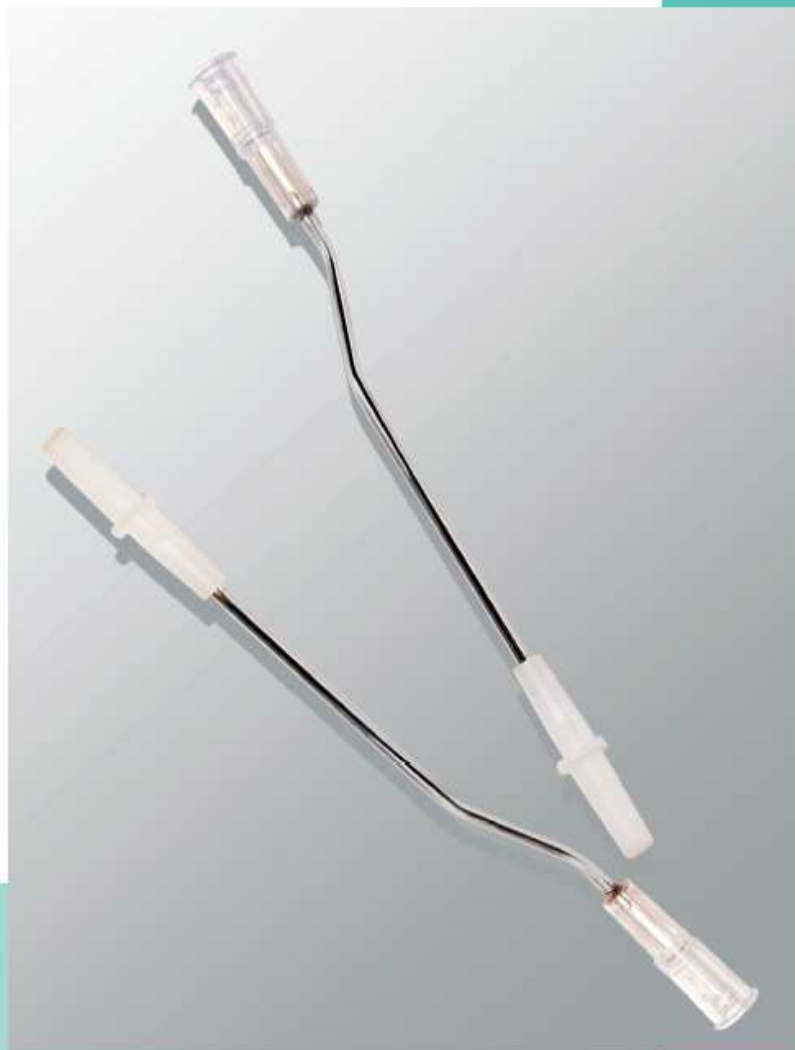

**Dispositif stérile à
usage
unique pour la
sclérothérapie des
hémorroïdes.
Ne contient pas de
latex.**

**A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.
Latex free.**



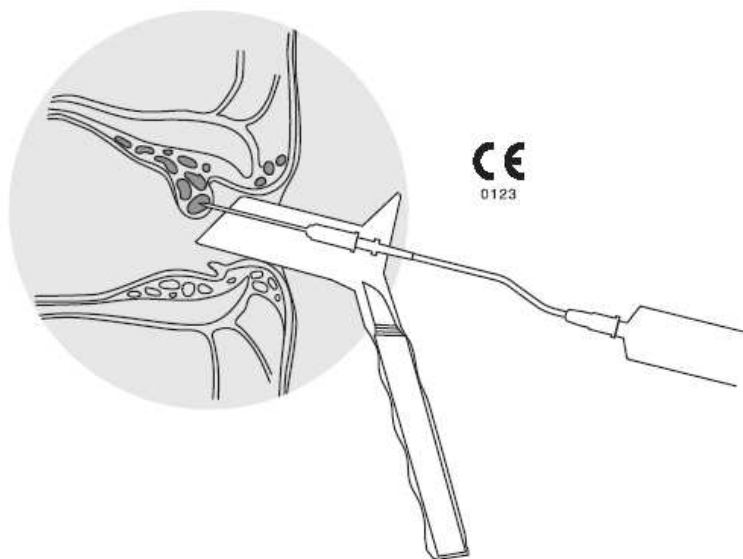

W.000120X1B REV 02 08 2005

REF A.5015

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Dispositif stérile à usage unique pour la sclérothérapie des hémorroïdes.

Ne contient pas de latex.

Ce dispositif consiste en une canule avec raccords luer mâle/femelle apte à recevoir, d'un côté, une seringue classique pour injections et, de l'autre côté, l'aiguille. Le profil de la canule déplace la main du chirurgien vers le bas en permettant une visualisation excellente du nodule à soumettre à sclérothérapie. L'opération est ultérieurement facilitée par l'utilisation de l'anuscopie Self.light[®] à éclairage incorporé.

Emballage: à l'unité

Stérilisation : oxyde d'éthylène

A disposable sterile device for haemorrhoid sclerotherapy. Latex free.

This is an accessory consisting of a cannula with male/female luer attachments. The female end fits on a normal syringe, and the male onto an injection needle. The cannula is designed to ensure the position of the operator's hand is moved downwards away from the direct line of sight, thereby making it possible to more clearly see the nodule to be sclerotised through the barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the Self.light[®] proctoscope with built-in light.

Quantity per box: per unit

Sterilised by: ETO

SAPI MED S.p.A. P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
www.sapimed.com • e-mail: info@sapimed.com

Distributed by: Medical Instruments Corporation - MIC France
Parc d'activités des Vallières - 41, impasse de l'Industrie -
69530 Brignais
Tél.: +33-(0)4-72 31 06 08 – Fax : +33-(0)4-72 31 60 39
<http://www.micfrance.com>